

bubblestar バブルスター ブラボー

・B・R・A・V・O・

取扱説明書

管理医療機器



製造元：原ヘルス工業株式会社

- ご使用にあたってはこの取扱説明書、または添付文書をよくお読みいただき、安全に正しくお使いください。
- この説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。
- 幼いお子様の手の届く場所には、保管しないでください。
- この製品は家庭用浴槽専用です。
- この製品は国内専用です。海外では使用できません。

禁転載

ごあいさつ

バブルスター ブラボーは、運動不足による身体の血流悪化や、社会生活でのストレスによるダメージを、日本古来の入浴習慣をつうじて改善しようと開発されたシリーズ最新機種です。同梱の遊湯エッセンスは、健康と美容のために薬用成分の働きを活かして開発されたバブルスター専用の薬用入浴剤です。

バブルスター ブラボーは、遊湯エッセンスとの相乗効果により、さらなる真価を発揮します。

脳を癒し 身体を癒し そして心を癒やす


一日の疲れとストレスから開放されるここちよさを、ぜひ“ブラボー入浴”でお楽しみください。この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございました。

目次

ご確認ください	1
安全上のご注意	2
バブルスターブラボーの特長	6
バブルスターブラボー 各部の名称	7
本 体	7
コントローラボックス	8
スイッチング電源	9
機器の設置	10
スイッチング電源	10
クランプの設置	13
本体への付属品の取り付け	14
コントローラボックスと本体の設置	15
ご使用方法	16
電源を入れる	16
コントローラボックスの操作	16
ご入浴方法	18
お手入れの仕方	19
専用入浴剤のご案内	20
ごあいさつ・目次	表2
故障かな？ 消耗品・別売品・仕様	表3
保証書・お客様相談室	表4

ご確認ください


- ① バブルスターブラボーを取り付ける前に、梱包内に以下のものが入っていることをご確認ください。
- ② 付属品は規定されたもの、または指定されたものを使用してください。

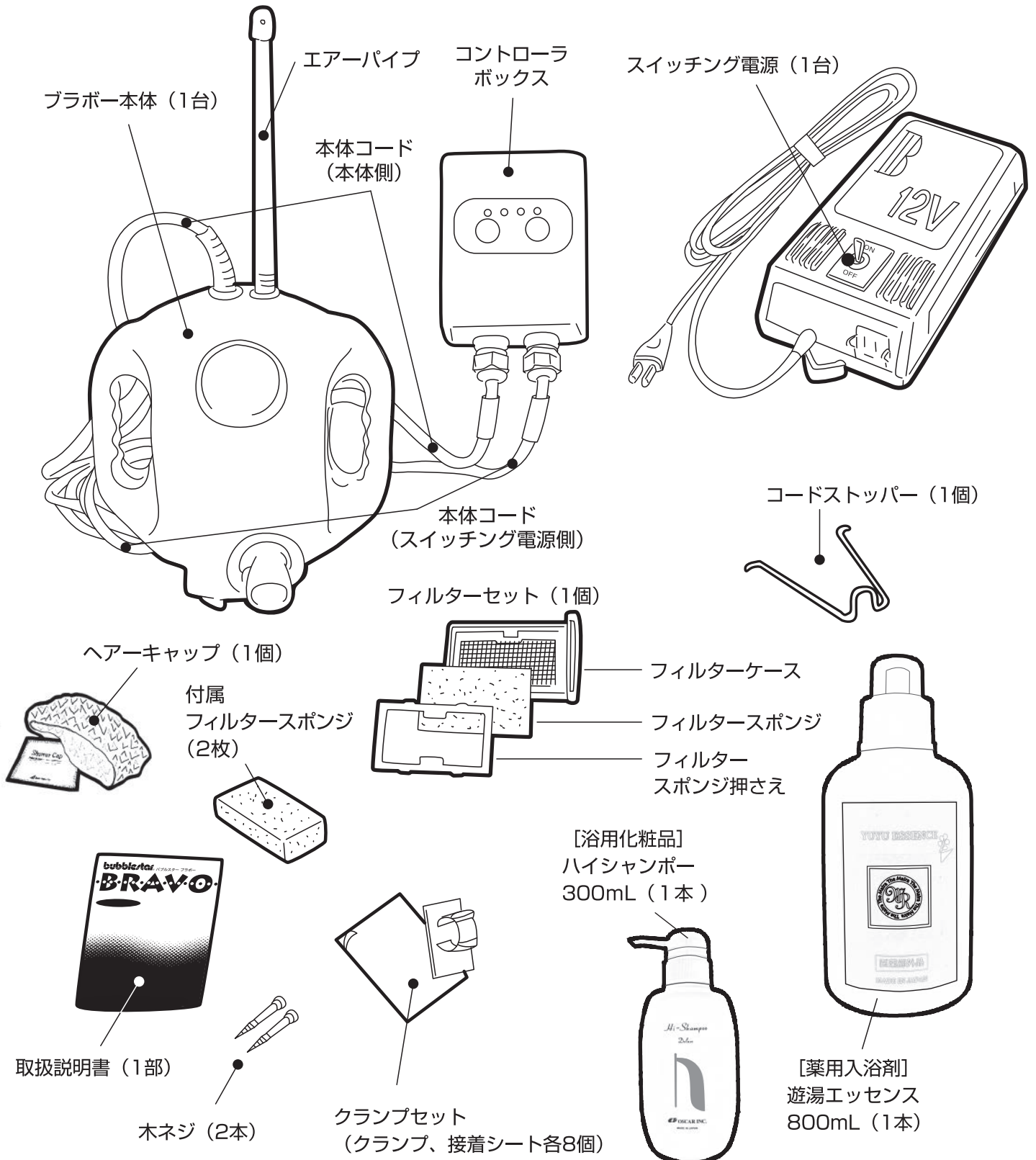


安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。内容(表示・図記号)をよく理解してから、本文をお読みにになり、記載事項をお守りください。

表示を無視した誤った取り扱いにより生じる内容を、次のように区分しています。

 **警告** 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」を示しています。

 **注意** 「けがや財産に損害を受ける恐れがある内容」を示しています。

お守りいただく内容の種類を「図記号」で区分しています。



強制(やらなければならないこと)を表しています。



禁止(やってはいけないこと)を表しています。

警告

Warning

身体の健康に重大な影響を与える恐れがありますので、医師から入浴を禁じられている人はご使用しないでください。また以下の人は、ご使用前に医師に相談してください。



強制

- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- 悪性しゅよう(腫瘍)のある人
- 心臓に障害のある人
- 出血のおそれのある人
- 妊娠初期の不安定期、または出産直後の人
- 糖尿病などによる、高度な末しょう(梢)循環障害による知覚障害がある人
- 安静を必要とする人
- 体温38度以上(有熱期)の人
[例] 急性炎症症状(倦怠感や悪寒、血圧変動など)の強い時期や、
身体が衰弱しているときなど
- 脊椎の骨折や捻挫、肉離れなどの急性[とう(疼)痛性]疾患の人
- その他、医療機関で治療中の人

ご使用中、身体に異常を感じた時には、直ちに使用を中止して医師や専門家にご相談ください。
また使用しても効果が現れない場合、医師または専門家に相談してください。



火災や感電、大けがを防ぐために、必ずお守りください

- 運転中に電源プラグを抜かないでください。
- 電源プラグはコードを引っ張って抜かないでください。
- 延長コードの使用、タコ足配線をしないでください。
- 束ねたり、引っ張ったり、重いものを載せたり、加熱・加工しないでください。
- 電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。
- 電源プラグやコンセントに付着したほこりは、定期的にとってください。
- 停電や異常時（こげくさいなど）には、運転を停止して電源プラグを抜いてください。
- 交流100V以外の電源で使用しないでください。
- 定格感度電流が30mA以下の漏電遮断器がある場所をご利用ください。
- スイッチング電源の上にモノを置いたり乗せたりしないでください。
- スイッチング電源に水をかけたり、濡れた手で操作をしないでください。
- スイッチング電源のファンモータ口をふさがないでください。
- スイッチング電源を、浴室など湿気のある場所に絶対持ち込まないでください。
- スイッチング電源の電源スイッチは、本体のご利用が終わりましたら、必ずOFFにして、電源を切った状態にしてください。
- 指定された場所以外で機器を利用しないでください。
- 付属品は規定されたもの、または指定されたものを使用してください。
- 機器を改造しないでください。
- 電源コードが破損した場合、コードの交換は、危険を防止するために、製造業者もしくは同等の有資格者にご依頼ください。





- 濡れた手で抜き差しや操作をしないでください。


故障の場合は、お買い上げの販売員、または原ヘルス工業(株)にご相談ください。

安全上のご注意

感電の恐れがあります。

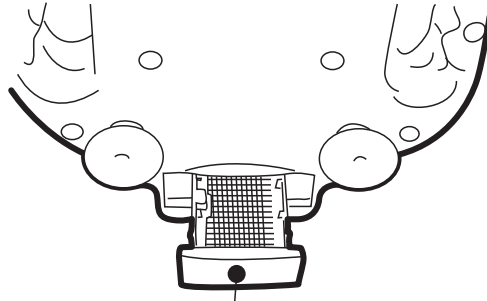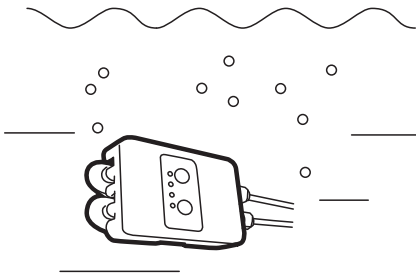

フィルターケースは、必ずしっかり
セットしてください。

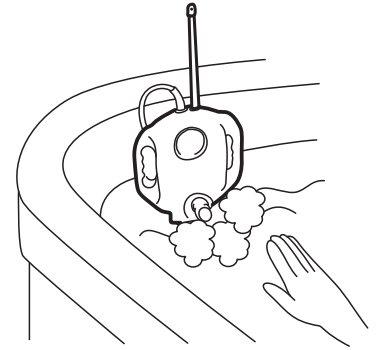

禁止

1

水中に落とすなどして、機器
に異常を感じた場合は、直ち
に使用を中止して、分解せず
に当社「お客様相談室」に修
理を依頼してください。



禁止

2


フィルターケースを緩めたり、
はずしたままでのご使用
は絶対にやめてください。事
故の恐れがあります。



禁止

3

吸込口を絶対にふさが
ないでください。事故の恐れが
あります。

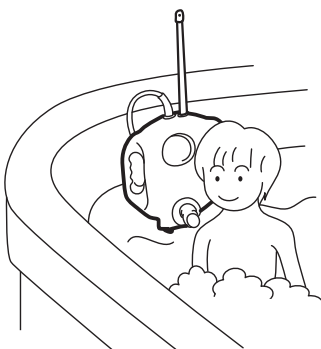

強制

4

お子様だけでの入浴中のご
使用は絶対にやめてくださ
い。機器本体の上で遊ばせ
たり、上に乗ったりしないで
ください。



強制

5

使用中に、浴槽内に潜るこ
とは絶対におやめください。吸
入口に毛髪が吸い込まれて、
事故になる恐れがありますの
でご注意ください。



強制

6


酒気を帯びた人や、ご高齢
者(とくに介護を必要とする
人)の入浴中の使用にはご
注意ください。事故の恐れ
があります。

注意

Attention !

使用前の注意事項

- 本体機器は浴室専用です。「気泡浴」以外の目的には使用しないでください。
- すべてのコードは容易に離脱しないように、正しく確実に接続してください。
- ご使用前に、電源や操作スイッチなどが正常に作動するか確認してください。
- しばらく使用されなかった機器を使用するときには前記に準ずるほか、機器が正常かつ安全に作動することを十分に確認してください。
- 他の治療器と同時に使用しないでください。
- 本体は浴湯が沸いてから設置してください。
- 入れたままで沸かしますと変形や故障の原因になります。
- 50度を超える浴湯に本体を入れないでください。

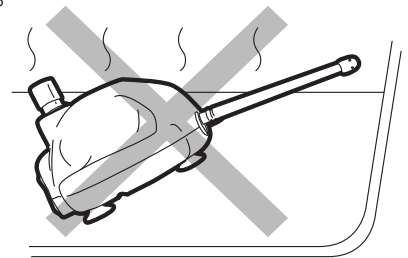


50度(沸かし過ぎ)

使用中の注意事項

- 機器に不具合や故障が発見された場合は、使用を直ちに中止して電源を切ってください。
- 身体に異常を感じたときは、使用を直ちに中止してください。
- 停電の時は直ちに電源を切り、操作ボタン、スイッチなどを、元の位置(OFF)に戻してください。
- 本体を落下させたり、ぶつけたりしないでください。
- 吸込口や噴出口から指や棒などを差し込まないでください。ケガや故障の原因になります。




- 1回の使用時間の目安は10～15分です。定められた使用時間を超えないようご注意ください。湯あたりや湯疲れなどの恐れがあります。

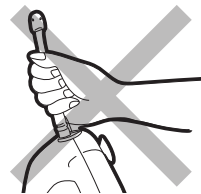

- エアパイプを握手代わりにしないでください。

使用後の注意事項

- ご使用を停止するときにはコントロールボックスのPowerボタンでOFFに、電源スイッチも必ずOFFに戻してください。
- コード類を取り外すときは、コードを持って引き抜くなどしてコードの接続部に無理な力を加えないでください。
- 使用後は機器本体を浴槽から取り外して、次回の使用に支障のないように本体表面やフィルターなどを清浄し、湿気のないところで乾燥、保管してください。
- 機器を衛生的に保つため、本体が汚れていたら中性洗剤をスポンジなど、柔らかいものに染み込ませて拭いてください。シンナー、ベンジン等の溶剤を使用しないでください。フィルタースポンジは浴湯の汚れ具合にもよりますが、最低3回ご利用のうち1度は洗浄してください。汚れが酷い場合にはフィルタースポンジを交換してください。放置しますと故障の大きな原因になります。
- 消耗品や残留物ならびに寿命が終わった機器及び付属品の廃棄に関しては地域で定める条例に従って廃棄してください。

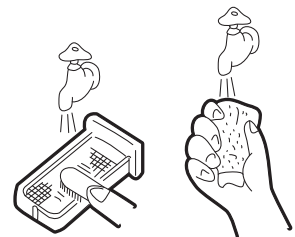

安全上のご注意

！ 機器の故障及び改造に関わる注意事項

- 故障の場合は勝手に修理などせず、お買い上げの販売員・発売元、あるいは当社お客様相談室にご相談ください。
- 機器は改造しないでください。

バブルスター ブラボーの特長

1

浴槽のどこへでも設置可能

3つの吸盤で浴槽に設置ができます。(設置ができない場合にはご相談ください)

2

重量わずか1.0kg。好きな部位へ自由自在

ハンドルを持って、身体の各部へ自由に噴射とマッサージができます。

3

ハイパワーな3モード切替機能

コンパクトでパワフル、しかも3段階の噴流出力の調整機能付。

4

静かにゆったりとした気泡浴

高性能のオリジナルポンプなので、音を気にせず静かにゆったりとご入浴いただけます。

5

ユニークで可愛いデザイン

ユニークで可愛いデザイン、ご家族でお楽しみいただけます。

★はじける泡の効果

本体内蔵の高性能オリジナル水中ポンプによって浴湯を吸い上げ、ノズルから一気に噴出させる際、エアパイプで空気を取り込むことにより、浴湯内で気泡流となります。これによってできるのが、細かな気泡群です。

バブルスター ブラボーは、この働きを利用し、次の2つの効果を生み出すことができる家庭用気泡浴装置です。


- ①身体の内まで温まる **温熱効果**
- ②身体がイキイキする **マッサージ効果**

※バブルスターブラボーは
〔管理医療機器〕です。


バブルスター ブラボー 各部の名称

本 体


正面

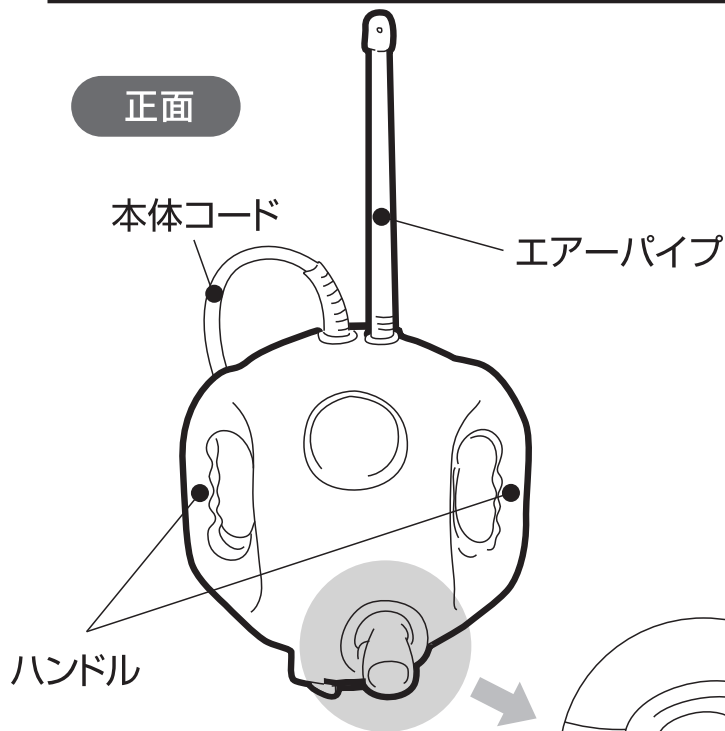


裏面

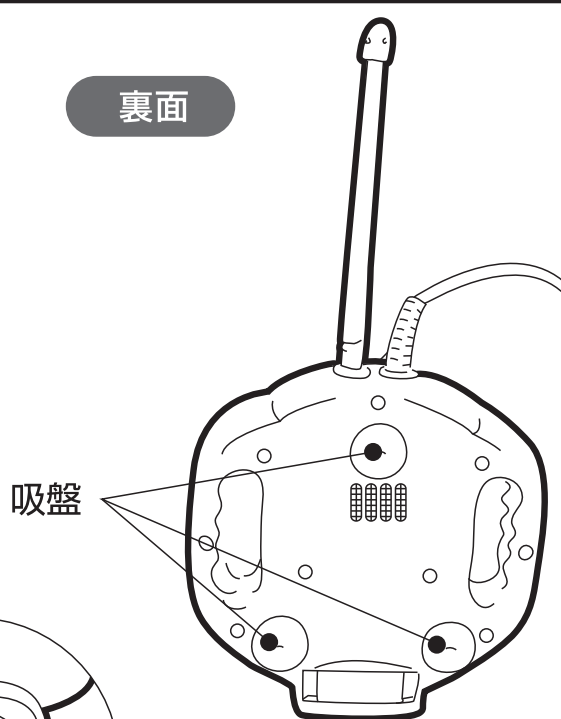


噴出ノズル

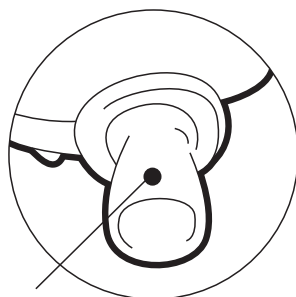


側面

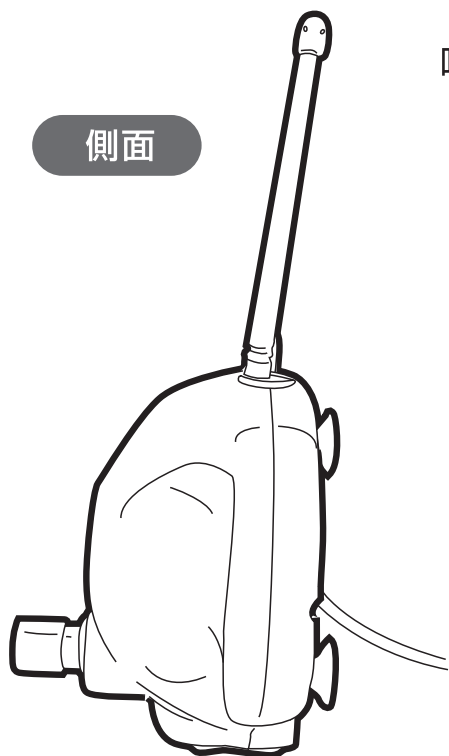

吸込口 下部

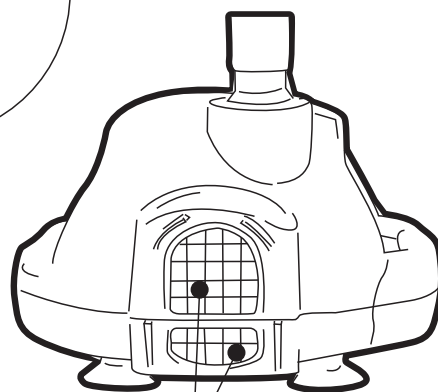

フィルター セット部分

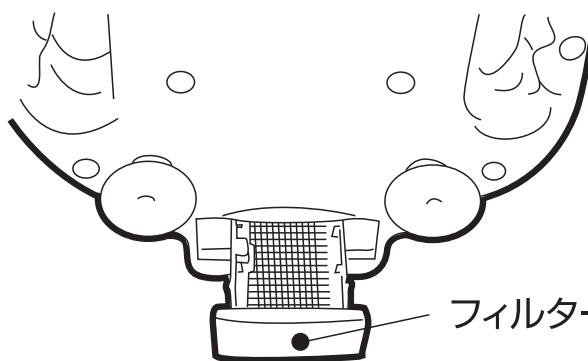

各部の名称

コントローラボックス

●過電流防止機能


本体の作動中に何らかの問題が生じ、電流値が設定値をオーバーした場合に自動的にポンプが停止します。

※ON-OFF(赤色LED)とHi(緑色LED)が点滅。

●空運転防止機能

本体を湯面上などの、適切な吸水ができない状態で作動させるとポンプに負担がかかるためIC回路が自動的にポンプを停止させます。

※ON-OFF(赤色LED)とLow(緑色LED)が点滅。

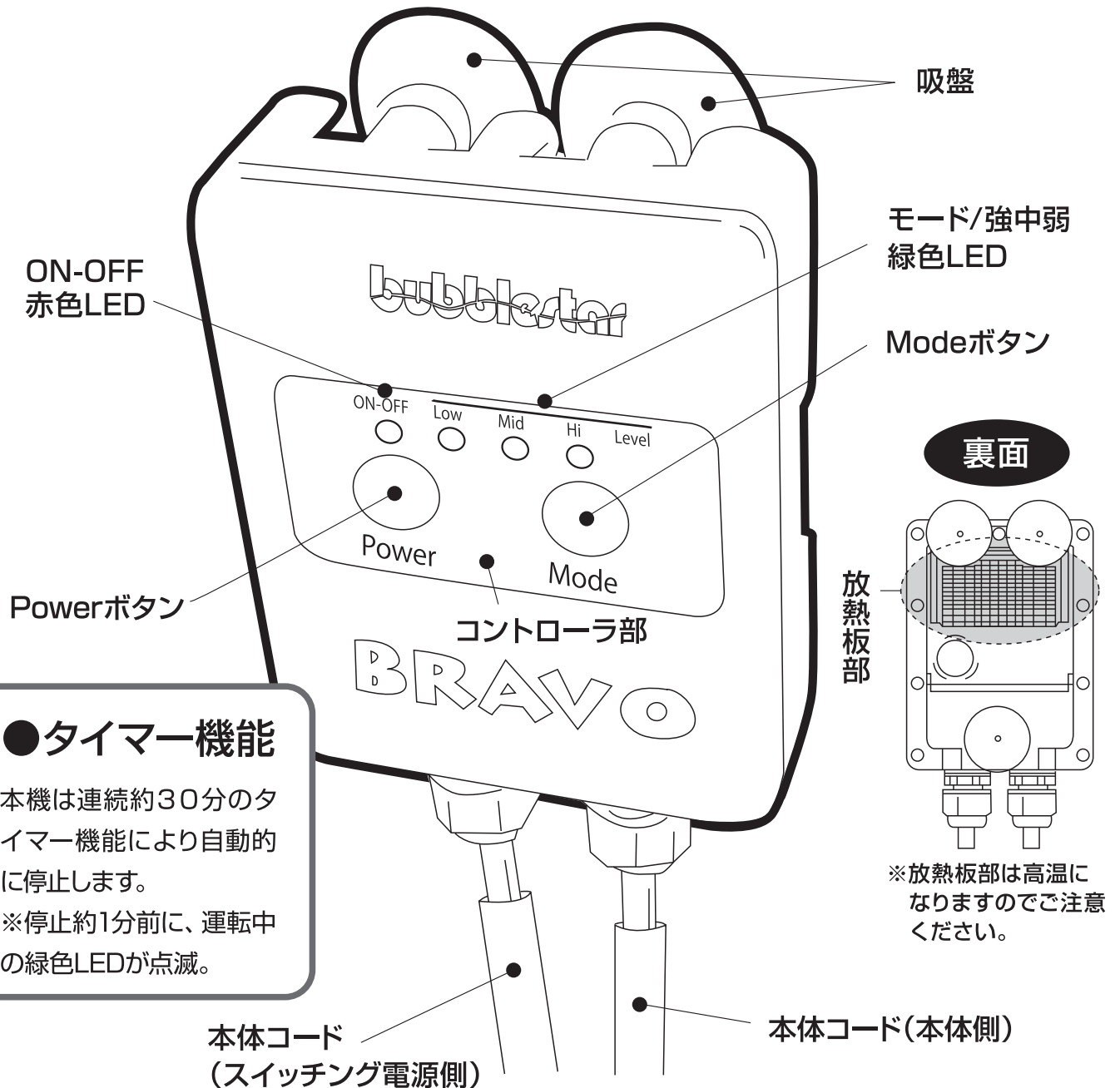


●タイマー機能

本機は連続約30分のタイマー機能により自動的に停止します。

※停止約1分前に、運転中の緑色LEDが点滅。

スイッチング電源

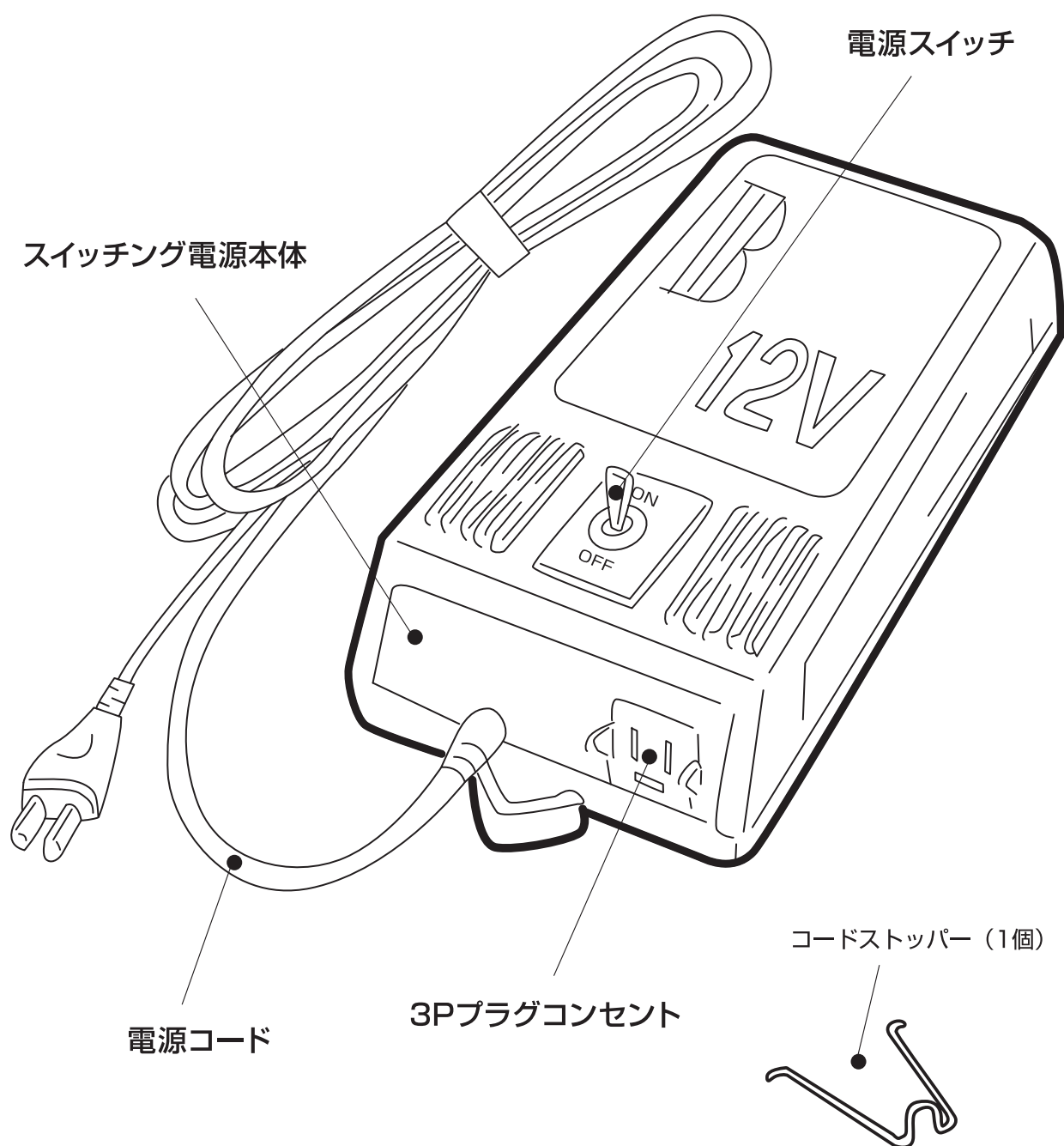


機器の設置

スイッチング電源

(スイッチング電源は必ず水のかからない場所に設置してください)


01

スイッチング電源は、本体を作動させるものですが、必ず浴室外に設置し、湿気や水滴がかからないようにしてください。故障の原因になります。

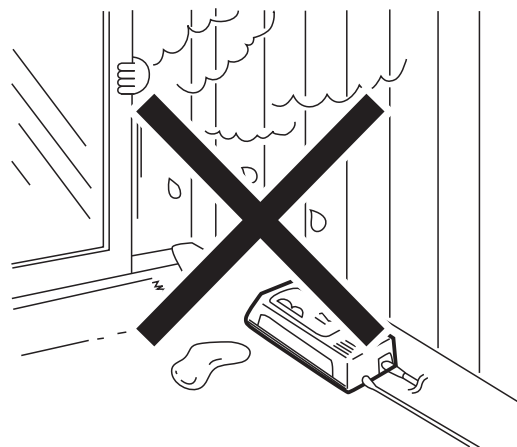

02


スイッチング電源は壁から10cm以上離します。本体に高温防止・放熱ファンが内蔵されておりますので、ファンモーターのある背後面と壁との間は10cm以上は必ず離して設置してください。

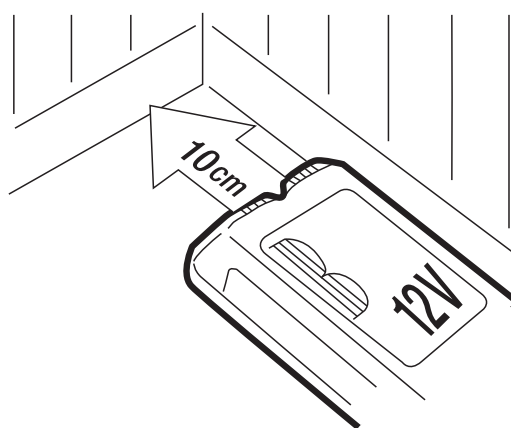


03

束ねてある本体コード（電源側）を伸ばして、スイッチング電源の3Pプラグコンセントに合わせて、本体コード3Pプラグを差し込み、付属のコードストッパーを必ずお掛けください。

※本体コードを束ねた状態で使用しますとコードが熱をもつことがありますのでご注意ください。各プラグは容易に離脱しないように、正しく確実に差し込んで接続してください。中途半端に差し込みますと故障や事故の原因になりますのでご注意ください。

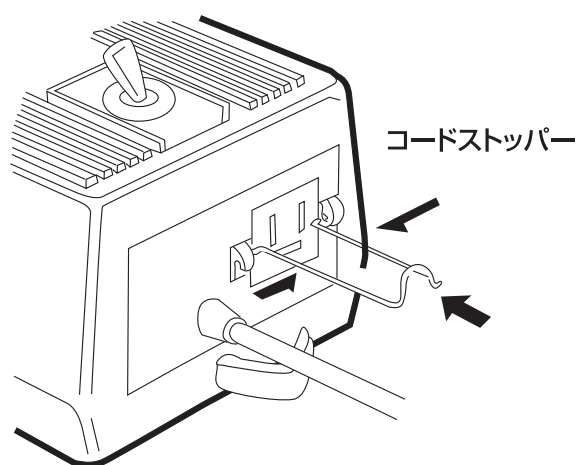


コードストッパーは、プラグのはずれを防ぐために必ずお掛けください。

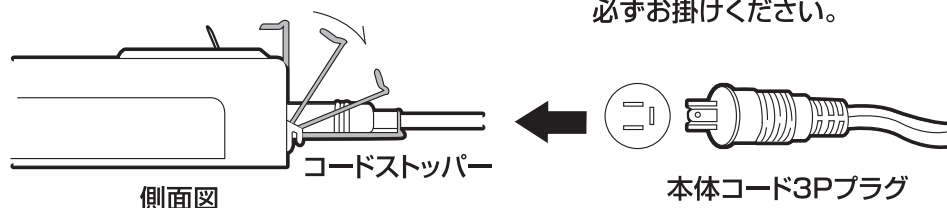

04

スイッチング電源のプラグを浴室外(脱衣所など)の家庭用100Vのコンセントに差し込んでください。(通常ははずしておいてご使用前に差し込んでください)

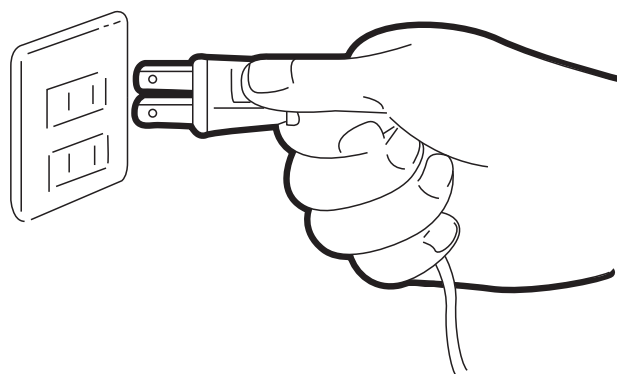

機器の設置



スイッチング電源

05

壁へ取り付ける場合は、付属品の取り付け用木ネジをご利用ください。

しっかりとした壁か柱にファンモーター口を上にして、確実に取り付けてください。


(注)ファンモーター口の周囲10cm以内には、障害物がないように設置してください。

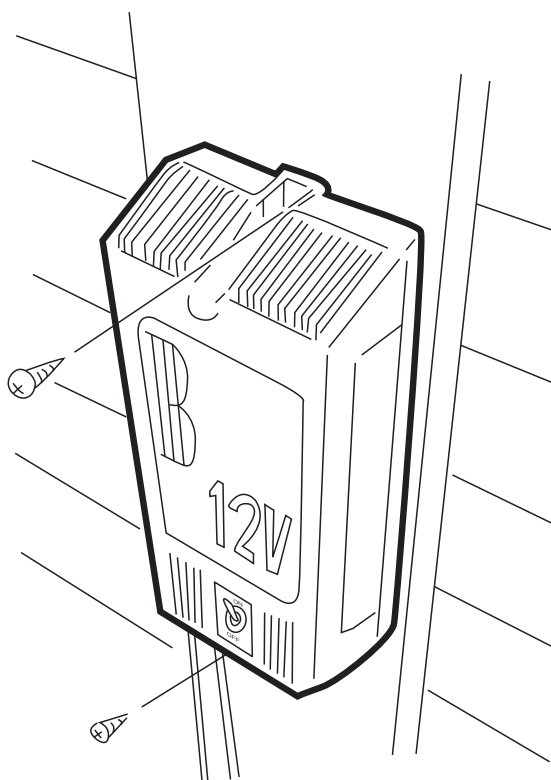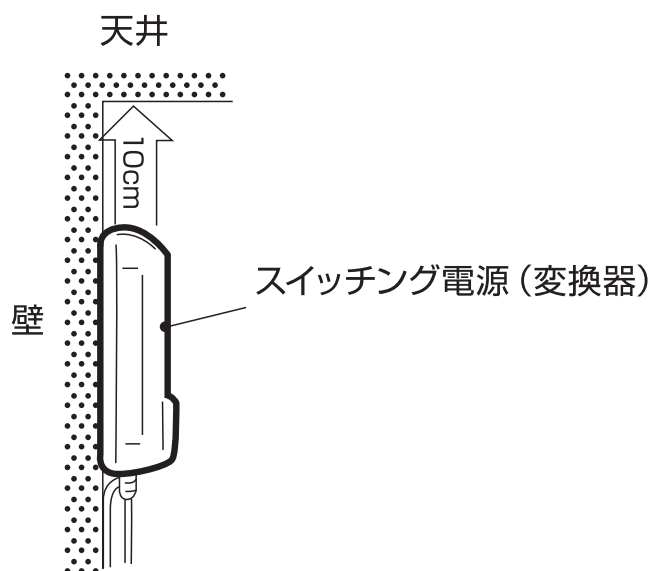

クランプの設置


01

適切な固定位置を決め、固定位置の汚れを（ほこり・水分など）拭き取ってください。スイッチング電源に接続した本体コードがご使用の際にじゃまになる場合、付属のクランプセットで本体コードを浴室の壁に固定してください。

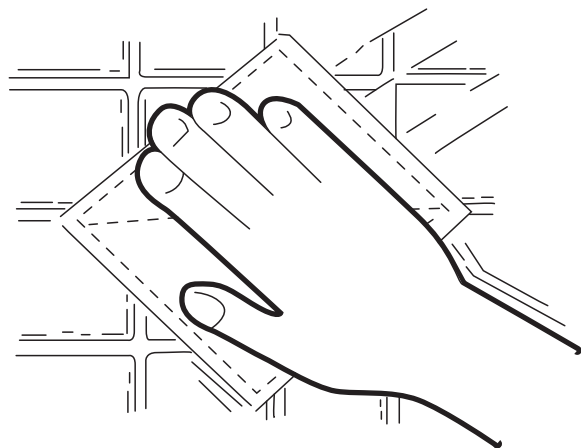


02

クランプ用接着シート（透明シール）を空気が入らないように貼ってください。そして、クランプの両面テープをはがして開口部を上にして貼って固定してください。

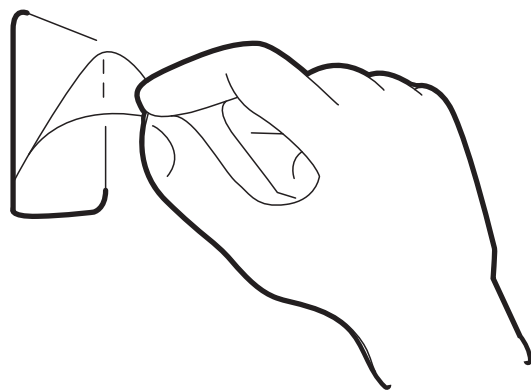

03

本体コードの曲がりを直しながら、まっすぐに固定してください。このときクランプが「カチッ」と音がするまでコードを押し込んでください。本体コードをはずす場合は、クランプの取手を引いてください。

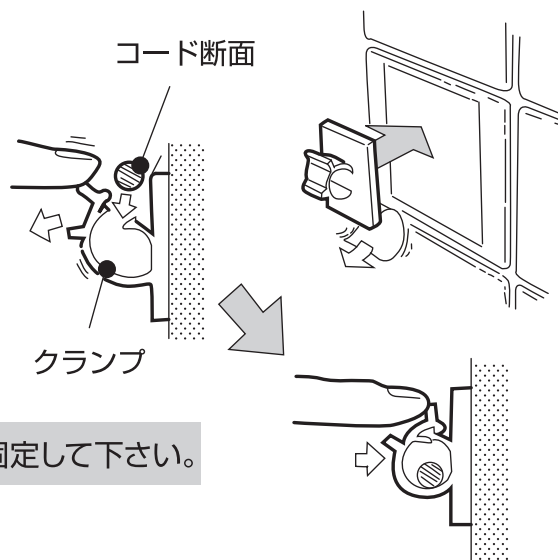


※コントローラボックスのコードも必ず、クランプで固定して下さい。

機器の設置

本体への付属品の取り付け


01

本体上部の接続口に、エアパイプを時計方向に回しながら取り付けます。ねじ込みが不十分だと空気が充分取り込まれませんので、ご注意ください。

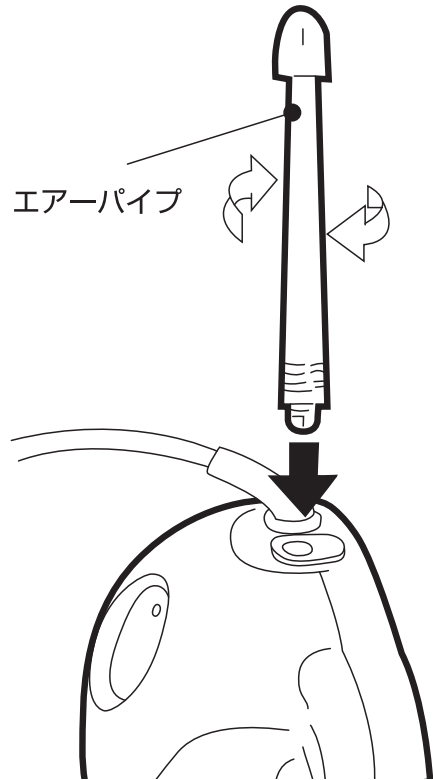

02

本体のフィルターケースにフィルタースポンジ及びフィルタースポンジ押さえをセットして取り付けます。フィルタースポンジを取り付けない状態で作動を続けると、事故や故障の原因となりますので、必ず取り付けてご使用下さい。

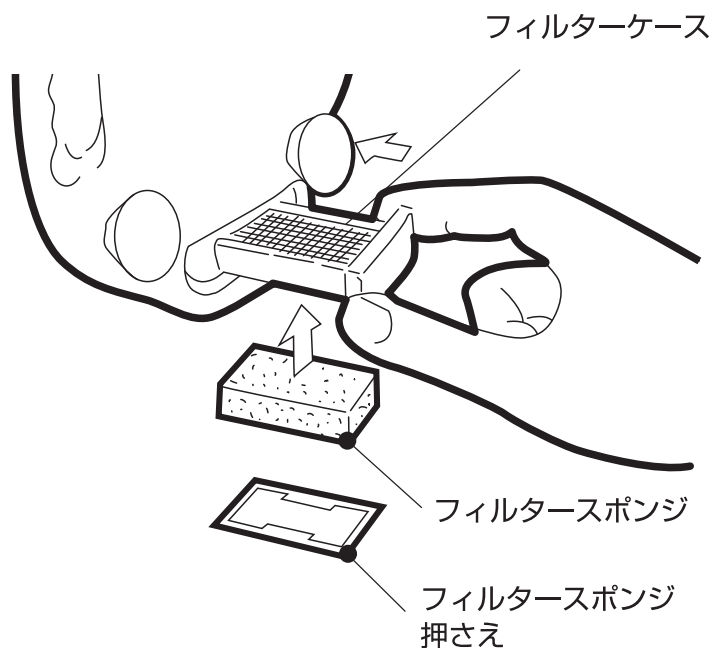


コントローラボックスの設置

本体コード(本体側)を、コントローラボックスに接続して、ボックス本体を浴槽上部(操作しやすい場所)にしっかりと固定します。

コントローラボックスの吸盤が吸着しにくい場所では、壁面に粘着フィルムなどを貼り吸着を容易にしたり、コントローラボックスの本体コードをクランプで固定するなど、落下防止対策を必ず行ってください。

コントローラボックスに防滴対策を施してはいますが、浴湯内に落下しますと故障やケガの原因となりますので、充分ご注意ください。

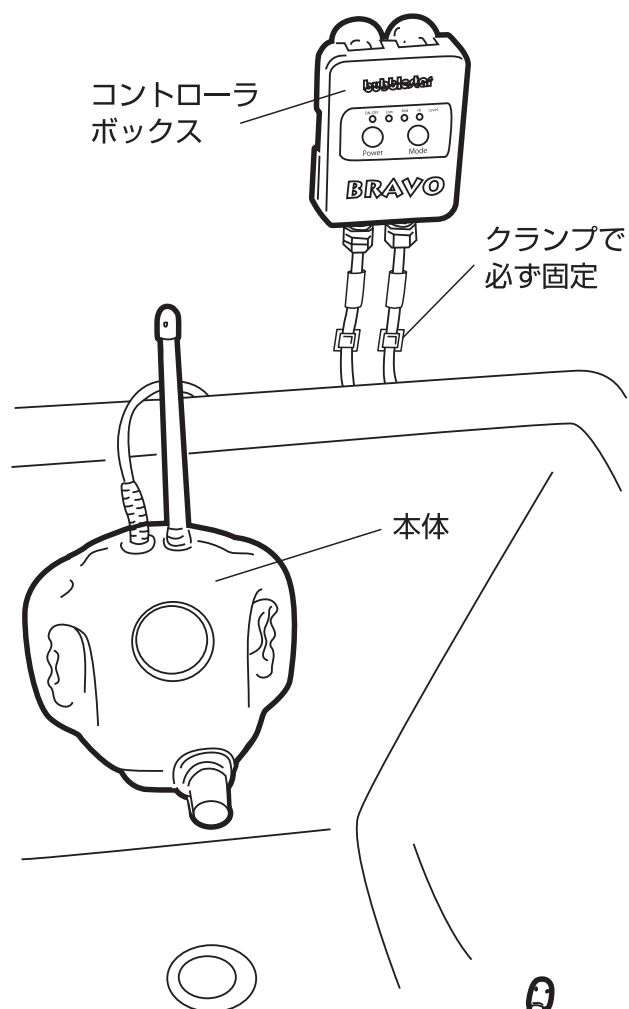


本体の設置

まず、本体を浴槽内に沈めます。このとき、空気口(エアパイプの頭の部分)は必ず湯面より上にセットしてください。


空気口を浴湯内に入れてご使用になっても、機械本体に支障をきたすことはありませんが、本体内に空気を導入できませんので気泡は発生しません。

本体吸盤で浴槽内にしっかりと固定します。

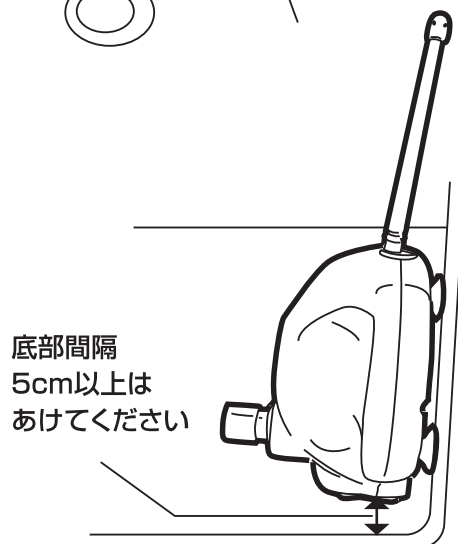

ご使用方法

電源を入れる

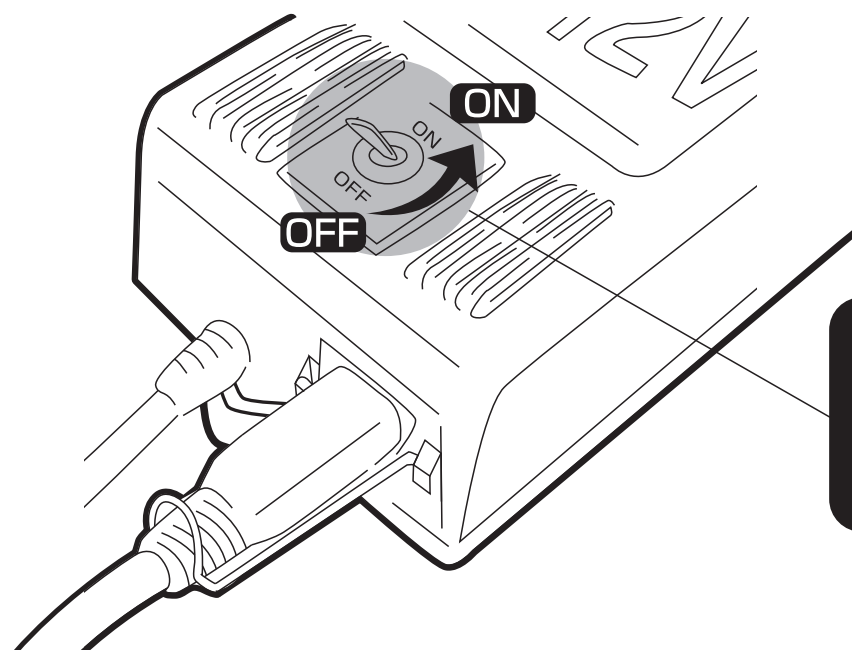


スイッチを
上げて電源を
ONにします。

コントローラボックスの操作

1

コントローラ部の
拡大図

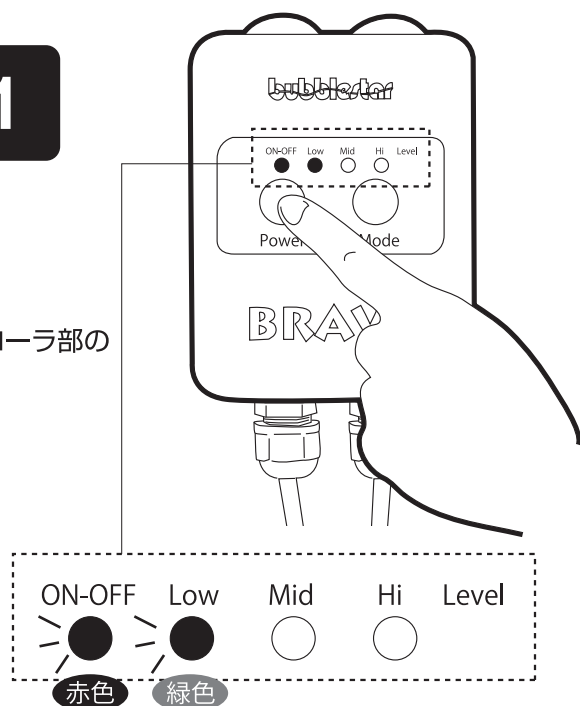

起動時はLow (弱) から始まります。

コントローラのPowerボタンを1度押すとON-OFFの赤色LEDとLowの緑色LEDが点灯し、運転が始まります。



気泡流の強さは、Low(弱)、Mid(中)、Hi(強)の3段階があります。Modeボタンでお好みの強さをお選びください。

停止する時は、再度Powerボタンを押してください。

※タイマー機能により、連続30分間の運転で自動的にOFFとなります。なお停止1分前に点灯中の緑色LEDが点滅してお知らせします。



2

拡大図

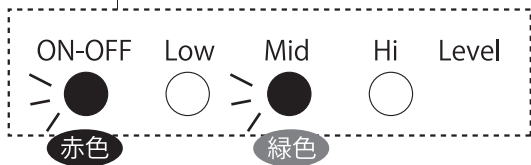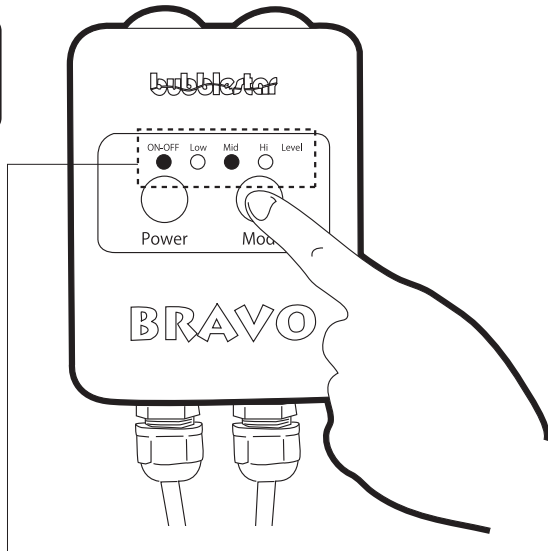



Mode ボタンでMid (中) を選択

拡大図

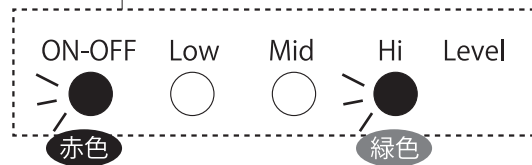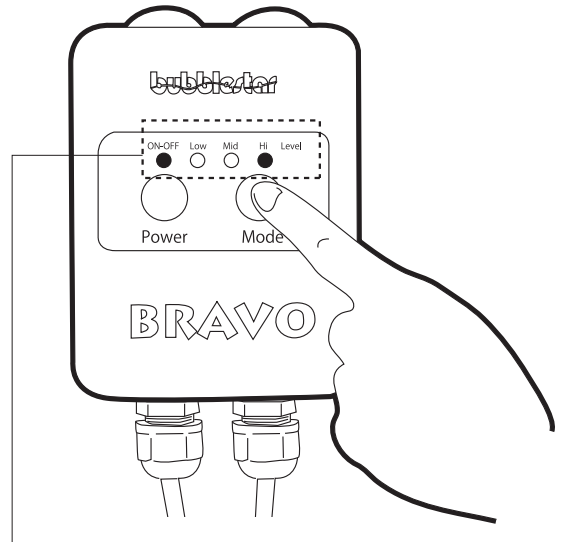


Mode ボタンでHi (強) を選択

拡大図

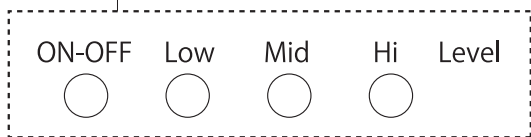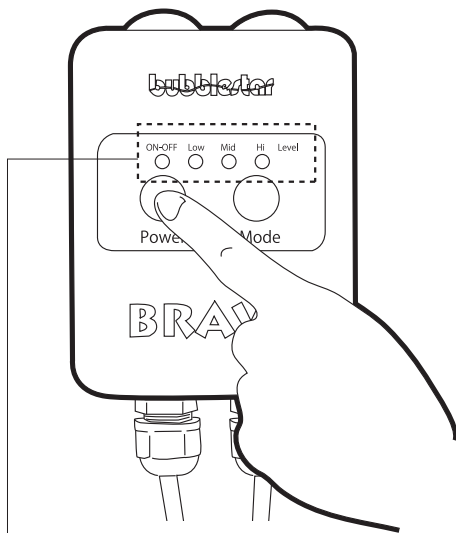

作動中にPower ボタンを
押すと停止します

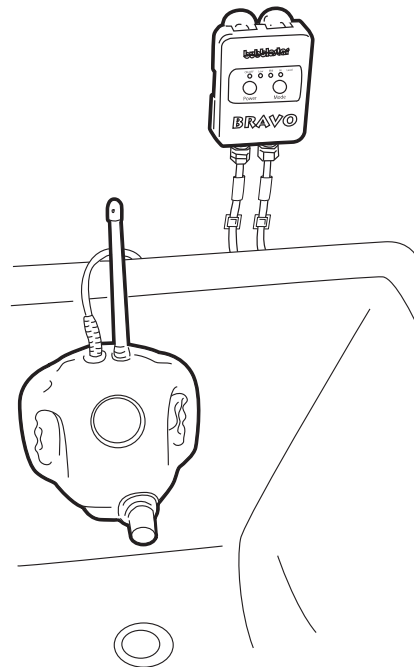

コントローラボックスは、
浴槽に落下しないよう、
しっかりと取り付けてください
(15 頁コントローラボックスの設置 参照)

ご入浴方法

1

コントローラボックスのPowerボタンを押し、電源をONにすると、本体先端の噴出ノズルからジェット気泡流が噴出されます。“爽快! バブルマッサージ”の始まりです。

2

ご入浴温度は38～40度前後。1回の入浴時間は10～15分くらいが適度ですが、ご自身の習慣や体調にあわせて、無理のないようご入浴ください。

3

また1日のご入浴回数は、できれば朝と晩の2回が理想ですが、お客様の体調と生活習慣などを考慮されてご入浴ください。

4

ご入浴の際には、バブルスター専用入浴剤である「遊湯エッセンス」(薬用)50mL(180～200Lの浴槽の場合)をとり、浴湯に加えよくかき混ぜてください。16の効能を発揮します。 → 20頁参照

5

入浴後は、発汗が旺盛になりますので、クーラーなどに身体をあてて急速に冷やさないように、バスローブやバスタオルで体を包み、完全に汗を出す習慣をつけてください。

お手入れの仕方

1 本体が汚れた場合


①最初に、本体コード3Pプラグを電源ユニットから抜いてください。

②中性洗剤をスポンジ等、柔らかいものに含ませ、ていねいに洗ってください。

※シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉・化学雑巾・ナイロントワシなどを使用致しますと本体に傷がつく場合がありますので、使用しないでください。

※スイッチング電源も水または中性洗剤を含ませた布をよく絞り、汚れを拭きとってください。

●必ず本体を浴槽から取り外して乾燥した場所に保管してください。

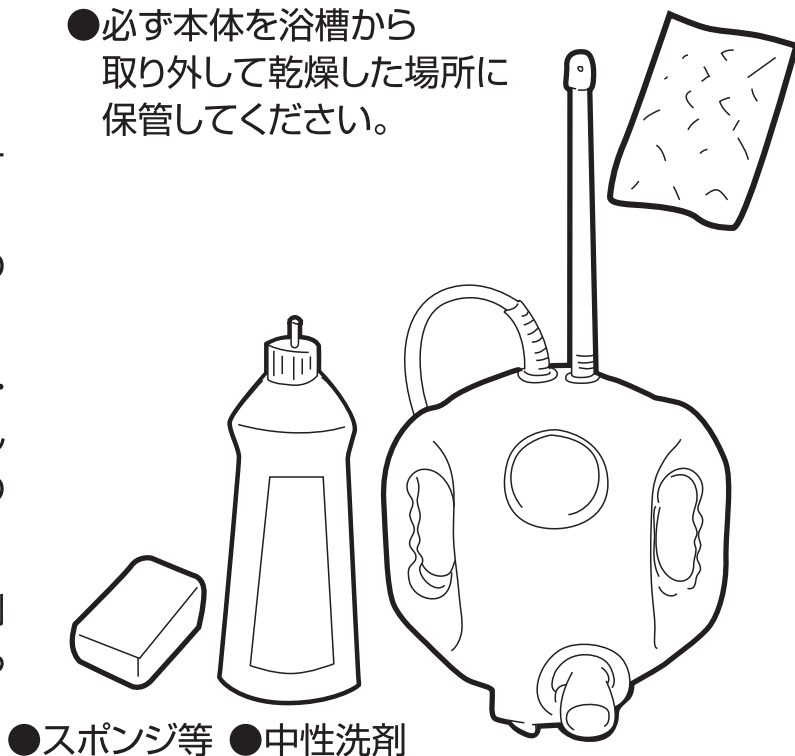

●スポンジ等 ●中性洗剤

2 フィルターの清掃

①本体フィルターケースを手前に引き出してください。

②フィルタースポンジ押さえをケースから取り外して、フィルタースポンジを洗浄してください。綺麗にならない場合は、フィルタースポンジを交換してください。

③フィルターケースの汚れは、ブラシなどを使い、流水で汚れを洗い流してください。

④フィルターケースにフィルタースポンジを入れ、フィルタースポンジ押さえをはめ込み本体にセットして完了です。(14頁02参照)

※フィルターケースを取り付けない状態での作動は、故障や事故の原因となります。絶対におやめください。

※使い古したフィルタースポンジは“燃えるゴミ”へ。本体機器は“粗大ゴミ”など、各地域の条例に従い分別して廃棄してください。

専用入浴剤のご案内

バブルスター専用浴用剤 ゆう ゆう 遊湯エッセンス

効能・効果

あせも・荒れ性・うちみ・肩のこり・神経痛・しっしん・しもやけ・痔・冷え症・腰痛・リウマチ・疲労回復・ひび・あかぎれ・産前産後の冷え症・にきび

価格 6,160円（税込） 内容量 800mL

健康と美容のために、薬用成分の働きを活かして開発したバブルスター専用の浴用剤です。

カミツレ抽出液などの有効成分が温浴効果を高め、プラントハーモニーエキスをはじめとする18種類の植物エキス、ヒアルロン酸を配合したとろみのある美容液タイプの液体薬用入浴剤です。 医薬部外品

【ご使用方法】

入浴時に50mL（180～200Lの浴槽の場合）をとり、浴湯に加え、よくかき混ぜてご使用ください。

ご使用後は蓋をしっかりと閉めてください。

※必ず浴槽にお湯を入れてから本品を入れてください。

※キャップの目盛りを目安に計量してください。



●故障かな? と思ったときの対処法

症 状	診 断	対 処 法
・コントローラボックスのスイッチを入れても作動しない。	⇨電源プラグ、あるいは本体コードにある3本プラグが抜けていませんか。 ⇨スイッチング電源の電源スイッチがOFFになっていませんか。	◎プラグをコンセントに差し込んでください。 ◎スイッチング電源の電源スイッチをONにしてください。
・噴出力が弱い。	⇨フィルターが汚れで詰まっていますか。	◎フィルターを取り外して洗ってください。
・気泡が出ない。	⇨エアパイプが詰まっていますか。 ⇨空気口が水中に入っていないか。	◎穴の詰まりを取り除いてください。 ◎水面より上に引き上げてください。
・使用中に停止する。	⇨配線、プラグの接続は確かですか。	◎外れているプラグを接続してください。

●消耗品・別売品

消耗品名	単 位	価 格 (税込)	消耗品名	単 位	価 格 (税込)
エアパイプ	1 本	858円	吸 盤	3 個	583円
フィルターケース(スポンジ押さえ付)	1 組	902円	クランプセット	1袋(8個入)	715円
フィルタースポンジ	2 枚	203円	薬用入浴剤 遊湯エッセンス(800ml)	1 本	6,160円

※廃棄上のご注意/消耗品、残留物、並びに寿命が終わった機器及び付属品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従って廃棄してください。

●仕様

販 売 名	バブルスター ブラボー
類 別	機械器具 77 バイブレーター
一般的名称	家庭用気泡浴装置(管理医療機器)
医療機器認証番号	223AFBZX00002000

■本 体

定 格 電 圧	100V	製 品 寸 法	H411×W210×D174 mm(エアパイプと吸盤含)
定格消費電力	100W	製 品 重 量	約1.0kg
定 格 時 間	連続 30分	電 源 コー ド	1.8m(本体側⇨コントローラボックス)
浴室内外の別	浴室内用 クラスⅡ □		5.5m(スイッチング側⇨コントローラボックス)
定 格 周 波 数	50/60 Hz	防 水 レ ベ ル	ポ ン プ 部 : IPX 7
定格出力電圧	≒ 12V		コ ン ト ロ ー ラ 部 : IPX 5

■スイッチング電源

定 格 入 力	~100V・230VA	定 格 出 力	≒ 12V・7A
浴室内外の別	浴室外用	重 量	700g
定 格 周 波 数	50/60 Hz		

※電源は交流100Vを安全のため直流12Vに変換して使用します。

●性 能

家庭用気泡浴装置(噴出水方式)	最 大 値
噴出水量 (ℓ/min)	47.0
噴出気泡量 (ℓ/min)	26.5
噴出圧力 (kPa)	40.0

保証書

バブルスター ブラボー 保証書

この製品は、厳密なる品質管理と検査を経てお届けしたものです。
本書は、お客様の正常な使用状態で故障した場合に、本書記載内容で製造元が、
下記の保証規定により無償修理をおこなうことをお約束するものです。

記

1. 保証期間は、お買い上げの日から2年間とします。
2. 保証期間中に故障が発生した場合は、本書を提示の上、お買い上げの販売員、または発売元にご相談ください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売員、または発売元にご相談ください。
4. 本保証書は、再発行致しませんので大切に保管してください。
5. 保証についての規定は、下記をご覧ください。

無償修理規定

1. 取扱説明書や注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、製造元が無償修理をいたします。
 2. ただし保証期間内でも、次の場合には有償修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げの後の落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外(例えば業務用での長時間使用、車両、船舶への搭載)での使用や国外で使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書の提示がない場合。
 - (ヘ) 本書に、お買い上げ年月日、お客様名、販売員名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
3. 本書は、日本国内のみで有効です。
 4. 本書は、再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

お買い上げ日および販売員名

お買い上げ日	年	月	日
販売員名			
保証書番号	BB-		

ご購入者名	サンプリ
ご住所	
電話番号	

ご使用方法・修理の相談などは

発売元	株式会社 ザ マイラ ☎0120-511-001 〒135-8402 東京都江東区佐賀 1-1-14 TEL:03-5621-1118 FAX: 03-5621-1117	http://www.the-maira.co.jp/ 携帯電話からもご利用いただけます。 受付時間 ●平日 月～金曜日 9:00～17:00
-----	--	---

お客様へ/お荷物を受け取られた日に、保証書へ販売員名とお買い上げ日をご記入ください。

製造元: 原ヘルス工業株式会社

〒135-0031 東京都江東区佐賀 1-1-14 TEL:03-5621-1011 FAX: 03-5621-1010