

# BEAUTY BATH SONIC

*Ultra Sonic Beauty System*

ビューティーバスソニック

超音波美容が、毎日の入浴を変える。



取扱説明書・保証書



株式会社 ザ マイラ

## はじめに

この度は「ビューティーバスソニック」をお買上げいただきまして、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みいただき、効果的にお使いください。

「ビューティーバスソニック」を末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

- お読みになられた後は、本書を大切に保管していただき、必要な時に再度お読みください。
- 本書P.6「ご使用の前に」をご参照ください。

## ビューティーバスソニックの特長


1秒間に100万回の超音波振動が、お肌に微細な刺激を与えて、お肌をひきしめ、すこやかに保ちます。当器は、入浴時にご使用いただける設計になっています。ご入浴タイムを大いにお楽しみください。

## 目次

本体と付属品	1
ご使用上の注意	2
警告表示	3
各部の名称と説明	4～5
ご使用方法・ご使用の前に	6
使用手順	6～11
使用中に困った時は？／メンテナンス方法	12
アフターサービスと保証書	13

# 本体と付属品

- ① ビューティーバスソニック 本体 ..... 1台
- ② 充電スタンド (H100mm×W100mm×D105mm) ..... 1台
- ③ ACアダプター (H72mm×W52mm×D26mm) ..... 1個
- ④ 取扱説明書・保証書 ..... 本書

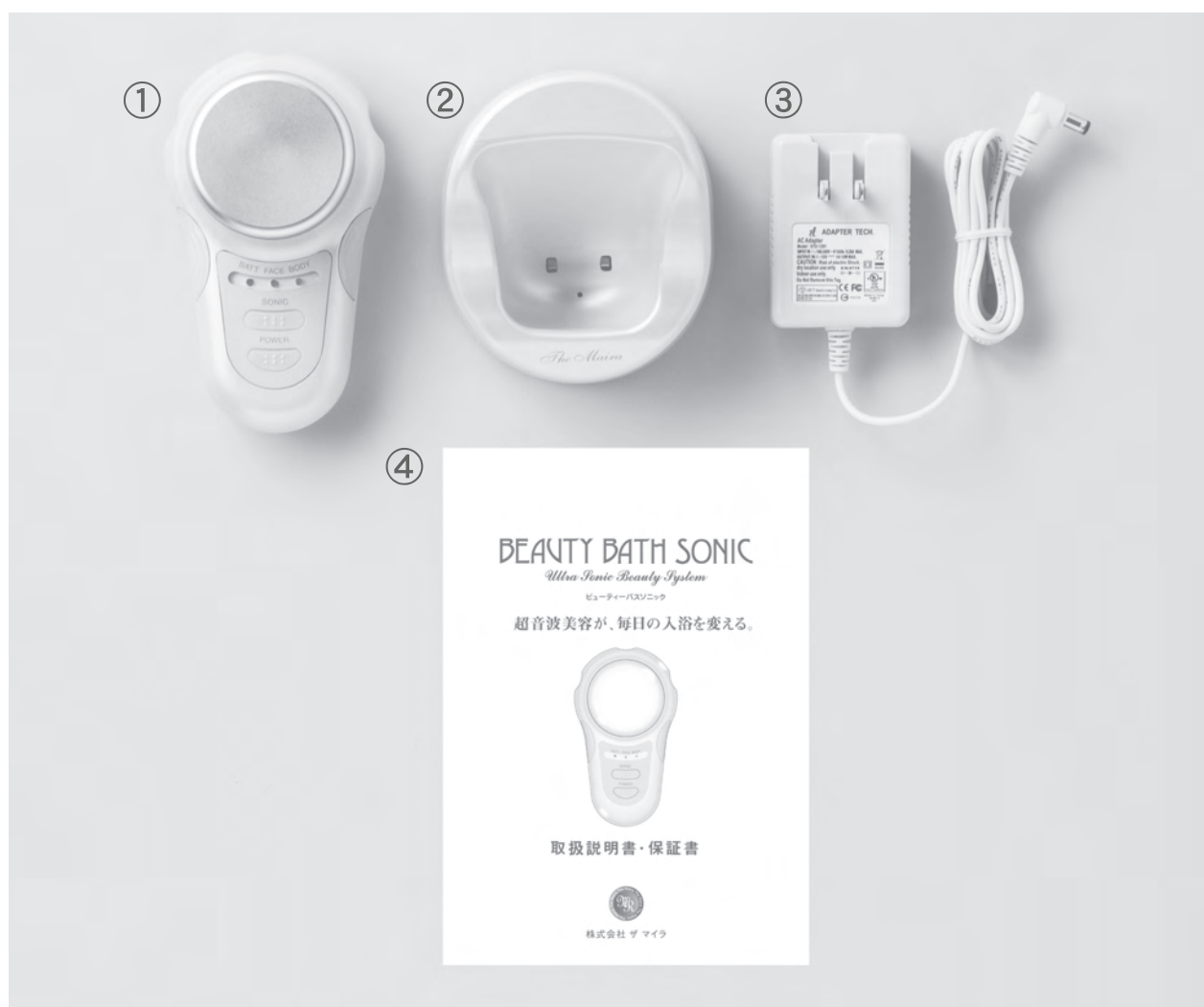

# ご使用上の注意

## ■ご使用の前に

「ビューティーバスソニック」は、安全性に充分配慮した設計となっておりますが、誤ったご使用、過度のご使用などにより、何らかの故障やトラブルがおこることが考えられます。特に、体調がすぐれない時のご使用は控えるなど、十分に注意を払ってください。本書をよくお読みになり、安全に、無理なくご使用いただくことで、より優れた効果をご実感いただけます。

- 使い始めは各部位に対して、連続使用を避けてご使用ください。
- ご自分で適正な使用サイクルを見極め、過度なご使用は避けましょう。

## ■ビューティーバスソニック使用上の注意

1. 次のような方は、機器の誤作動を招く恐れがありますので、ご使用はご遠慮ください。
  - ・ペースメーカーなどの体内埋込型医療電子機器をお使いの方
  - ・人工心肺などの生命維持用医療電子機器をお使いの方
  - ・心電計などの装着型の医療用電子機器をお使いの方
2. 下記のような症状がある方は、原則としてご使用はご遠慮ください。
  - ・心臓疾患・急性疾患・血圧異常・脳梗塞または脳梗塞の恐れのある方、発熱性疾患・感染性疾患・結核性疾患・悪性腫瘍・顔面神経痛・アトピー性皮膚炎・血友病疾患・知覚障害・紫斑症・骨粗鬆症が進み骨折しやすい方、そのほか重症の疾患がある方や医師の治療を受けている方
  - ・特にお肌が敏感な方・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張をおこしている方・内出血しやすい方・アレルギー体質・妊娠中または妊娠の可能性のある方、生理中の方、37度以上の熱がある方、飲酒中の方、疲労が激しい方、そのほか体調がすぐれない方
3. お肌に外傷、皮膚病などがある方は、ご使用前に専門医などにご相談ください。
4. 美容整形を行っている部位には使用しないでください。
5. 超音波の音射は、頭部、目と目のくぼみ周辺、耳、のどぼとけ、心臓部へは行わないでください。
6. イヤリング、ピアス、ネックレスなど金属製品は、必ずはずしてからご使用ください。また、金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる箇所にも使用しないでください。
7. かゆみやほてり、物理的的刺激などによる病的なシミ、化粧品、ニキビ、吹き出物などで皮膚炎症をおこしている方。
8. 万が一、お肌に異常がおきた場合、直ちに使用をやめて、専門医などにご相談ください。

## 警告表示

下記のサインがついている注意事項は必ずお読みください

### 警告

取扱を誤りますと、使用者が重傷（重症）または傷害を負うことが想定されます。

### 注意

取扱を誤りますと、使用者が軽傷（軽症）を負うことが想定されるほか、機器の損傷などの発生が想定されます。

### 警告


下記のような医療用電子機器をお使いの方は使用しないでください。

- ペースメーカーなどの体内埋込型医療用電子機器
- 人工心肺などの生命維持用医療電子機器
- 心電計などの装着型の医療用電子機器
- 本器を美容以外の目的には使用しないでください。
- お子さまの手の届かないところに保管してください。

### 注意

- 本体およびACアダプター（電源）は、絶対に分解または改造をしないでください。機器の内部に触れると感電する恐れがあります。
- 電源が入っている状態で、お子さまには絶対に手を触れさせないでください。誤作動や故障、感電の恐れがあります。
- 本体や電源コードの上に重いものを絶対に乗せないでください。火災や故障の原因になります。
- 充電スタンドを長時間ご使用にならない時は、必ずプラグをしっかりとってコンセントから抜いてください。

# 各部の名称と説明

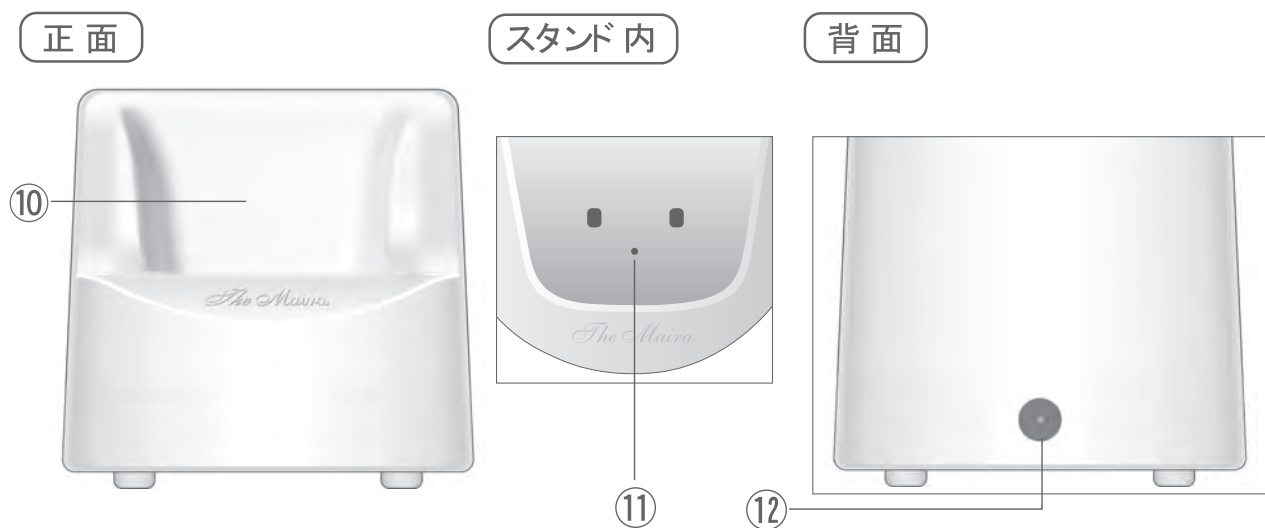

## 《スイッチボタン》

- ① POWER 電源タッチボタン  
ボタンを押すたびに電源ON／OFFが切り替わります。  
電源ON時は、FACEモード(緑ランプ)が点灯します。
- ② SONIC 切り替えボタン  
ボタンを押すたびにFACEモード／BODYモードが切り替わります。  
FACE／BODYモードの切り替えボタンです。
- ③ 表示LED BATT  
使用中は消灯します。  
電池切れ及び充電中は、赤ランプが点滅します。  
充電完了は赤ランプが点灯します。
- ④ FACEモード  
動作中は緑ランプが点灯します。
- ⑤ BODYモード  
動作中は橙ランプが点灯します。

なお、ボタンを押すたびに“ピッ”と音が鳴ります。

10分タイマー終了時..... “ピー”(約3秒)

約3分前電池切れ少し前時..... “ピッピッピッ”

電池切れ時..... “ピ ——”(約10秒)

## 《本体各部》

- ⑥ 超音波ヘッド  
本体を落としたり、ぶついたりしますとキズや故障の原因になります。
- ⑦・⑧ グリップ
- ⑨ 充電端子  
ご使用後本体の水気を拭き取り、充電スタンドにセットしてください。
- ⑩ 充電スタンド  
充電スタンドは、防水ではありませんので水がかからないようにしてください。
- ⑪ 水ヌキ穴  
充電を行う時には、水ヌキ穴にゴミなどが詰まっていないか確認後、ご使用ください。  
※スタンド内に水が入った場合は、水ヌキ穴より出ます。置き場所にはくれぐれも注意してください。
- ⑫ ACアダプター用入力端子  
※本機充電スタンドには、付属のACアダプター以外は使用しないでください。

## ご使用方法

### ご使用の前に

○ お買上げ後、最初に必ず充電を行ってください。

〔充電方法〕

- ① 使用手順の **1** **2** をご参照ください。
- ② BATT表示(赤)ランプが点滅し、充電を開始します。  
(充電時間:最大約180分)
- ③ BATT表示(赤)ランプが点灯に変わりましたら、充電完了です。

- !** **注意**
- あまり頻繁に充電すると電池寿命が短くなってしまいます。電池残量が少なくなり、警報ブザーが鳴ってから充電することをお勧めします。
  - 本体は防水仕様ですが、充電時は充電端子が濡れていないことを確認してください。
  - 浴室内での充電は絶対にしないでください。
  - 使用後は、本体の電源を切り、水気は拭き取ってください。

## 使用手順

ご使用の際は、P.4～P.5の「各部の名称と説明」をご参照のうえ、操作ボタン、部位など①～⑫に沿ってご確認ください。

- !** **注意** ご使用後充電する際には、本体の水気を拭き取り、充電スタンドにセットし、充電してください。

**1**

充電スタンドの背面にあるACアダプター用入力端子にプラグを差し込みます。次にACアダプターをご家庭用のコンセントに差し込みます。





2

充電スタンドにセットし、フル充電 (赤ランプ点灯)してからご使用ください。

3

充電が完了しましたら、本体をスタンドからはずし、操作ボタン①のPOWERボタンを押します。

※POWER ボタンを何度も早く押すと、電源が入らない場合がありますので、その場合は2~3秒待って再度POWER ボタンを押してください。



4

超音波ヘッドを真上に向け水平にし、水滴を数滴乗せます。水が振動していれば正常に作動しています。

5

操作ボタン②のSONIC ボタンを押し、FACEモードかBODYモードを切り替えて選択します。

- FACEモード時は、緑ランプ点灯
- BODYモード時は、橙ランプ点灯



作動時間については、タイマーにより10分間FACE/BODYモードを連続使用できます。使用中にFACE/BODYモードを切り替えた場合は、再度10分間連続使用が可能です。タイマーが終了した場合は、再度POWERを押し、SONICボタンでFACE/BODYモードを選択してご使用ください。

※連続使用時間: FACE/連続使用 約120分 BODY/連続使用 約80分



**注意** 水の振動が確認できない場合は、充電が不十分です。再度充電してください。それでも振動しない場合は、販売店まで相談してください。

### ●ビューティーバスソニックの主な使用例


気になる部位に5~10分使用してください。

**顔** お肌をひきしめ、ツヤツヤに

**腕** すっきりマッサージに

**ウエスト** すっきりマッサージに

**足** 気になるところをラクラクお手入れ

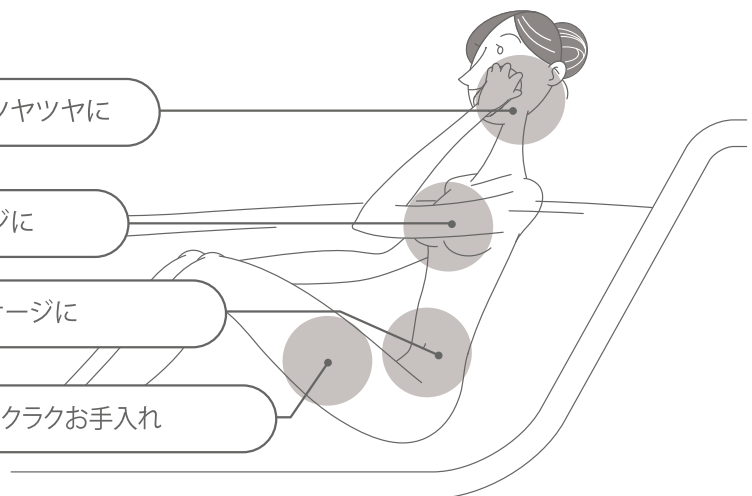

## 使用手順 FACE ①

浴槽の外でご使用になる場合は、ヘッドの密着度を高めるために、ソニックジェリー(別売)をお使いください。

ご使用の前に

# Before

MR プランタハーモニー「クレンジングオイル」「フォーミングウォッシュ」で、クレンジングと洗顔を充分に行い「ピュアローション」などでお肌を整えておきましょう。

クレンジング

洗顔

基礎化粧品

超音波美容

POWERボタンで電源を入れ、SONICボタンでFACEモードに切り替えます。(緑ランプが点灯したことを確認してください)

1

お肌に(超音波)ヘッドの表面全体を密着させるように軽く押し当て、ゆっくり移動させてお使いください。




2

超音波ヘッドを顔の中心から外側に向かって、円を描くようにお肌の上を滑らせます。お顔のトリートメントは1回につき、5~10分を目安に行ってください。



3

片側を顔の下から上に向かってお手入れします。終わったら反対側もお手入れします。

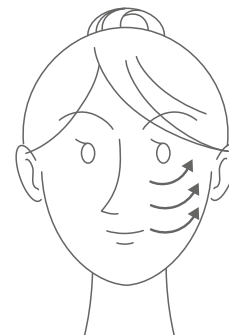

## 使用手順 FACE ②

気になる部分を集中してケアしたい時。


1

口もとのケアは右図のように下から上へ  
お手入れしてください。  
お肌を引き締め、ハリを作ります。  
反対側も同様に。




2

ほほ全体のケアは右図のように内側から外  
側にお手入れしてください。  
お肌にハリと弾力が感じられます。

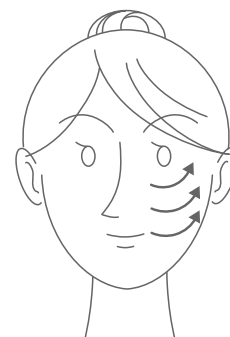

3

ほほから目尻のケアは右図のように目も  
とをなぞるように、内側から外側にお手  
入れしてください。  
お肌にハリを作ります。  
反対側も同様に。

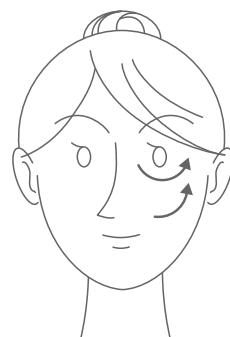

ご  
使用  
の後  
は

# After

ご使用後は、MR プランタハーモニー「フォーミングウォッシュ」  
で洗顔を行い「ピュアローション」「メリテッドエッセンス」「サ  
ミットクリーム」などでお肌を整えましょう。

超音波美容

洗顔

基礎化粧品



注意

- 超音波ヘッドを1ヶ所にとどめないようゆっくり動かし続けてください。
- のどぼとけや目の上(まぶた)などには使用しないでください。
- BODYモードでお顔に使用しないでください。
- 浴室での使用中は、本体を落とすと破損の恐れがありますのでご注意ください。
- カベなどに当たると、本体にキズ、破損の原因になりますのでご注意ください。

## 使用手順 BODY ①

浴槽の外でご使用になる場合は、ヘッドの密着度を高めるために、専用ジェル(別売)をお使いください。

POWERボタンで電源を入れ、SONICボタンでBODYモードに切り替えます。  
(橙ランプが点灯したことを確認してください)

1


右図のように各部位で超音波ヘッドをゆっくり動かしお手入れしてください。

上半身のトリートメント図

表面

身体の内側から外へ向かって  
円を描きながら、下から上へ


円を描きながら、内側へ  
円を描きながら、  
内側から外へ向かって

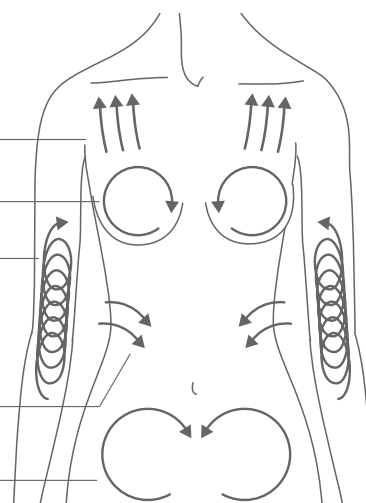

背面

上下に

下から上へ向かって

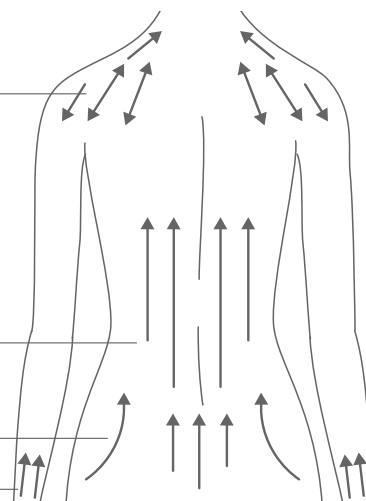

**!** 注意 心臓の上、背骨や関節の上(くるぶし、ひざ、ひじ)、へその上は避けてください。

## 使用手順 BODY ②

1


右図のように各部位で超音波ヘッドをゆっくり動かしお手入れしてください。

下半身のトリートメント図

表面

上下に


円を描きながら、下から上へ

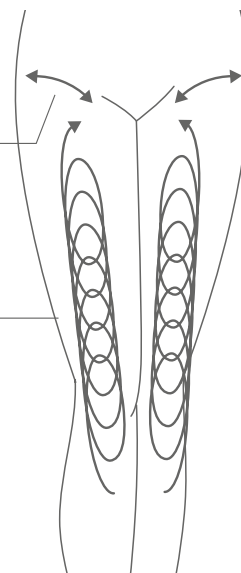

背面

円を描きながら、  
内側から外へ向かって

円を描きながら、下から上へ

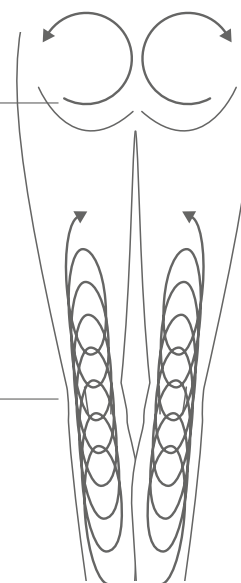

そのほか手のひら、足のツボにもご使用できます。

ご使用の後は

# After

ご使用後は、「アルティメイトボディローション」などでお肌を整えましょう。

超音波美容

基礎化粧品

## 使用中に困った時は？

お困りの内容	ご確認ください
充電できない	ACアダプターをコンセントに差し込んでありますか？ 充電スタンドにACアダプターがきちんと接続されていますか？ ご家庭のヒューズ、もしくはブレーカーが切れていませんか？ 本体、充電スタンド 端子に汚れ、ゴミ、または濡れていませんか？ 本体が充電スタンドにしっかりセットしてありますか？
電源が入らない	十分に充電しましたか。
ソニック(超音波)がでない	電源が入っていますか？ 十分に充電しましたか？

## メンテナンス方法

- 本体の水気をやわらかい布で拭き取って保管してください。
- ヘッド 部が汚れた場合、中性洗剤を使用してやわらかい布で拭き取ってください。
- 電池交換

電池は消耗品のため、ご使用状況により寿命が変わります。

防水仕様のため、お客様による電池交換はできません。満充電後のご使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命切れです。本体と充電スタンド及びACアダプター一式を同梱のうえ、発売元に元払いにて電池交換をお申しつけください。

電池交換費用 5,000円+消費税

上記金額には、電池交換・機能点検・防水パッキン一式の交換を含みます。

## -----◆アフターサービスと保証書◆-----

取扱説明書のご使用方法に従って使用した状態で、保証期間内に故障が生じた場合には、無償で修理させていただきます。保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」の記入をご確認のうえ、大切に保管してください。機器本体の保証期間は、お買い上げ日より1年とします。保証期間内でも、不当な改造による故障や取扱説明書以外の使用上の誤りに起因する故障などは、無償修理または有料であっても修理をお受けできないことがあります。詳しくは下記、保証書のご使用方法と保証規定をお読みください。

### ビューティーバスソニック -----◆保証書◆-----

#### <保証書のご使用方法>

※この製品は、厳密な品質管理と検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による自然故障の節は、下記保証規定により無償修理申し上げます。

※お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、発売元に修理をご依頼ください。

#### <保証規定>

1. 取扱説明書、注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、発売元が無償修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、商品と本書をご提示のうえ、発売元にご依頼ください。
3. ご転居の場合は事前に発売元にご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、そのほかの天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
  - (ニ) 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車輻、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
  - (ホ) 本書の提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
  - (ト) 使用環境や使用条件、経年変化による故障など、消耗品または使用条件に起因する故障及び消耗品の交換
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、裏面の発売元にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後3年間です。

お買い求めのビューティーバスソニックのご購入日を下記に記入してください。

購入日：平成 年 月 日 No. \_\_\_\_\_

ご住所： \_\_\_\_\_

お名前： \_\_\_\_\_

保証期間：1ヶ年

サンプル



MODEL	TM-BS
ACアダプター	ワールドワイドタイプ 入力 100V～240V 出力 12V 1A
使用電池	専用リチウムイオン電池
防水レベル	IPX7相当
本体寸法	H140mm×W80mm×D65mm
本体重量	約220g

販売店

発売元

株式会社 ザ マイラ

〒135-8402 東京都江東区佐賀1-1-14

TEL.(03)5621-1118

FAX.(03)5621-1115

<http://www.the-maira.co.jp/>